

新闻资讯

当前位置：主页 (<http://www.jiebiaotest.com/>) > 新闻资讯 (/a/news/) >

口罩，防护服，护目镜选择指南

新闻资讯 (/a/news/) | 2020-02-03 10:14

一、医用口罩，防护服，护目镜规格要求参考

1. 口罩

口罩医用规格总结（国内&国外外标准）

【国内标准】

医用防护口罩（需要防高压液体喷溅）

规格：GB 19083-2010

3M 1860/1870/9132 可以，3M1860为一线员工最标配！其它 3M 款基本不行

其他防护口罩 n95/n99

规格：GB 2626 强制性标准，非油性颗粒过滤效率≥95%

用于**非**以下情形：1）近距离接触感染病人 2）进行有可能产生气溶胶的操作，如吸痰、插管等 3）产生体液喷溅可能的操作

必须面部贴合不漏气，不带呼吸器！

医用外科口罩 YY 0469-2010 或者 0469-2011，需要独立包装（除了防护口罩外，医用外科口罩也非常需要）

△ 需合成血液穿透测试（防飞沫血液体液）

△ 需符合微生物指标，过滤效率大于等于95%，使用非油性颗粒物测试

△ 需提供工商营业执照，医疗器械注册证，医疗器械生产许可证，第三方检测报告

△ 国外捐赠产品参考前面标准，提供产品说明书，营业执照，进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单，正规的收据或电子凭证





请您留意**【国外标准】**

医用防护口罩（需要防高压液体喷溅）

下图标红的两款，才属于医护级别，需要 Fluid Resistant Claim！

美国 NIOSH 认证，N95/N99+Fluid resistant（CDC美国疾控认证）

欧标是 FFP2 或 FFP3，不带呼吸阀，同时具备 fluid resistant

Division	Healthcare/ Medical	OH&ES	Healthcare/ Medical	OH&ES
	1860/1860S	8210/8110S	1870	9210
Model/Catalog Number				
NIOSH Approved	Yes	Yes	Yes	Yes
N95 Filtration	Yes	Yes	Yes	Yes
FDA Cleared	Yes	No	Yes	No
Fluid Resistant Claim	Yes	No	Yes	No
Can be used in surgery	Yes	No	Yes	No
Fit testing required when switching to or from the Healthcare or Occupational models	Yes	Yes	No, when switching from 9210 based on identical construction*	No, when switching from 1870 based on identical construction*

普通防护口罩（普通人和不接触高压液体飞溅的医务人员使用）

欧标 FFP2/FFP3

美国 NIOSH 认证，非油性颗粒过滤效率 $\geq 95\%$

医用外科口罩

美标：ASTM F2100-II 标准，level 2 & level 3 可以 欧标：EN14683 + Type IR

Understanding ASTM levels of protection is Key

1

2

3

ASTM F2100-11 Levels		<div> <div></div> <div>Resistance to penetration by synthetic blood, minimum pressure in mm Hg for pass result</div> </div>	<div> <div></div> <div>Differential pressure, mm H₂O/cm² (Breathability)</div> </div>	<div> <div></div> <div>Bacterial filtration efficiency</div> </div>	<div> <div></div> <div>Sub-micron particulates filtration efficient at 0.1 micron</div> </div>	<div> <div></div> <div>Flame spread</div> </div>
Level 1: low barrier protection General use for short procedures and exams that don't involve aerosols, spray or fluids	80 mm Hg	<4.0	≥95%	≥95%	Class1	
Level 2: moderate barrier protection For low to moderate levels of aerosols, spray and/or fluids	120 mm Hg	<5.0	≥98%	≥98%	Class1	
Level 3: maximum barrier protection For heavy levels of aerosols, spray and/or fluids	160 mm Hg	<5.0	≥98%	≥98%	Class1	

请您留言



ASTM F2100-11 Level 2

Surgical and Procedure Masks

Designed to resist ASTM Level 2 (moderate) protection from fluid strike-through, masks are available as either surgical masks with ties or procedure masks with earloops. If the fluid risk involves potential splash and splatter, both surgical and the procedure mask styles are also available in wraparound visor versions for added protection.

[Click here](#) to download information on our full line of ASTM F2100-11 Level 2 compliant face masks.



ASTM F2100-11 Level 3


Surgical and Procedure Masks

FLUIDSHIELD* masks from Halyard have long been considered the industry standard. Our FLUIDSHIELD* Level 3 face masks now meet the ASTM Level 3 (high) fluid protection standard. Designed to provide high fluid resistance, masks are available as either surgical masks with ties or procedure masks with earloops, both with wraparound visor for added protection.

[Click here](#) to download information on our full line of ASTM F2100-11 Level 3 compliant face masks.

如何在口罩上寻找到标准 & 不合规口罩示例

请您留言

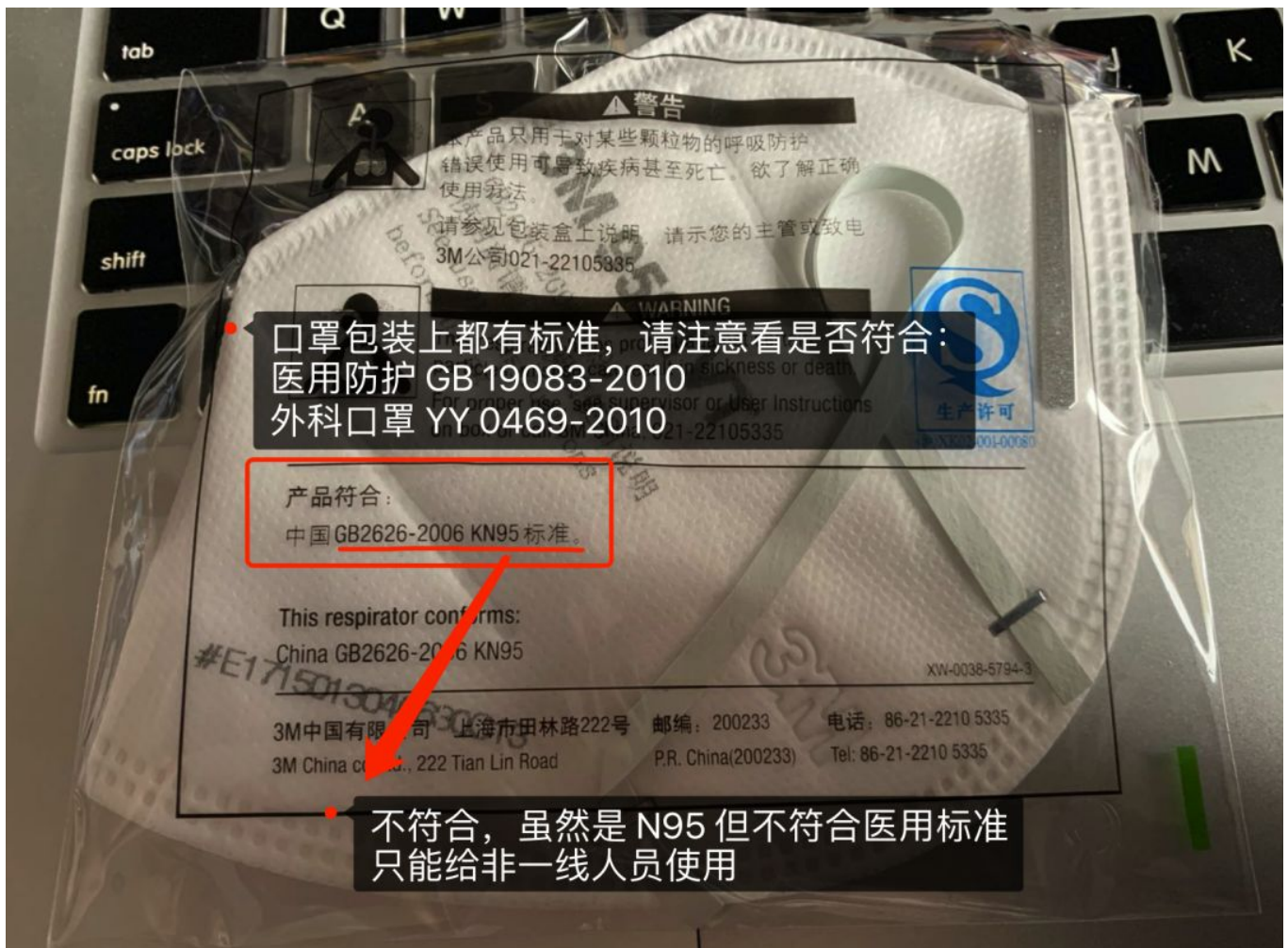

请您留言



△有呼吸阀是不可以的

具体澄清一下：符合 **GB 2626 + 无呼吸阀**的款也是医院需要的，属于下面这档防护口罩：

其他防护口罩 n95/n99

用于**非**以下情形：1）近距离接触感染病人 2）进行有可能产生气溶胶的操作，如吸痰、插管等 3）产生体液飞溅可能的操作

必须面部贴合不漏气，不带呼吸器！

可用防护口罩图例（分医护 & 普通）

a) 3M 型号 9132/1860（官方推荐）

目前确认可接受的产品型号和规格标准
Confirmed models of Medical Protective Gears

极·智
EXPERIENCE FOR EXCELLENCE

口罩 Healthcare respirator and surgical mask

3M 9132/1860 (Officially recommended)

3M

参数要求 Specs:

- NIOSH N95/KN95 (GB2626-2006)/YY-0469-2011
- Fluid resistance at minimum 120 mmHg pressure

世卫组织官方相关指引
General requirement for coveralls from WHO Guidelines:

- **Medical/surgical mask, high fluid resistance, good breathability**
 - EU standard directive 93/42/EEC Class I, EN 455,
 - EU standard directive 89/686/EEC Category III, EN 374,
 - ANSI/ISEA 105-2011,
 - ASTM D6319-10 or equivalent

请您留言



符合 GB 19083

请您留言

中国 > 所有 3M 产品 > 个人防护设备 > 防护口罩 > 医疗用口罩

3M 产品讯息

没有可选项目

医疗用口罩

您的选择: ☒ 医疗用口罩 ☒ 个人防护



1860 N95 医用口罩

b) 3M 1870+

c) 其他防护口罩（普通人和不接触高压液体喷溅的医务人员使用）

用于非以下情形：1) 近距离接触感染病人 2) 进行有可能产生气溶胶的操作，如吸痰、插管等 3) 产生体液喷溅可能的操作

必须面部贴合不漏气，不带呼吸器

中国 GB 2626 强制性标准，非油性颗粒过滤效率≥95%

欧标 FFP2/FFP 3

美国 NIOSH 认证，非油性颗粒过滤效率≥95%

c) 3M 8810

d) PFR P1 P2

e) TRUSCO TR-3200B

请您留言

f) Honeywell Sperian SAF-T-FIT Plus

g) Spectra SHIELD-9500

f) 其他欧标 FFP2 FFP 3

极·智

INNOVATION FOR EXCELLENCE

目前确认可接受的产品型号和规格标准

Confirmed models of Medical Protective Gears

口罩 Healthcare respirator and surgical mask

Confirmed Product Models:

• 3M 9132/1860/1870+/8810

• PFR P1 P2

• TRUSCO TR-3200B

• Honeywell Sperian SAF-T-FIT Plus

• Spectra SHIELD-9500

合规医用外科口罩（图片所示为医生确认可用）
“稳健医疗”符合YY0469

请您留言

www.jiebiaotest.com/a/news/497.html

8/28

winner 稳健医疗

604-002403

医用外科口罩

Surgical Mask

长方型 绑带 17cm × 9cm



生产许可证: 粤食药监械生产许 20020537 号

注册证编号: 粤械注准 20152640745

产品技术要求编号: 粤械注准 20152640745

产品说明书

适用范围: 供临床医务人员在有创操作过程中佩戴, 为接收处理的患者及实施有创操作的医务人员提供防护, 阻隔血液、体液和飞溅物传播。

主要结构组成: 由无纺布和N95过滤布为主要原料热合而成。

产品性能: 合成血液穿透、过滤效率、压力差、阻燃性能、微生物指标、环氧乙烷残留量、皮肤刺激性、细胞毒性、迟发型超敏反应均符合 YY 0469 的要求。

使用说明:

- 1) 将有鼻夹的一边向上, 将两端的绑带系结于脑后、将两端的橡筋条固定于头部适当位置。
- 2) 轻按鼻夹使其与鼻梁贴合, 然后按着鼻夹, 将口罩下端调节至下颌处。

禁忌症、注意事项、警示及提示性说明:

- 1) 使用前请检查包装是否完好, 对外包装标志、生产日期、有效期进行确认, 并在灭菌有效期内使用。
- 2) 应确保口罩展开后覆盖着鼻梁至下颌处, 以获得预期的防护效果。
- 3) 本产品为一次性用品, 禁止重复使用。
- 4) 本产品已采用环氧乙烷灭菌, 使用前若发现包装破损, 须重新灭菌处理后方能使用。
- 5) 对无纺布过敏者慎用。
- 6) 产品使用后, 应按医院和环保部门要求进行处理。
- 7) 灭菌级产品采用纸塑包装, 出厂时环氧乙烷残留量应不大于 $10 \mu\text{g/g}$ 。

特殊储存条件、方法: 建议贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。

运输条件: 在运输时应防止重压、阳光直射和雨雪浸淋。

运输要求按订货合同规定。

有效期: 三年。

灭菌级 **STERILE EO**
经环氧乙烷灭菌

生产批号:

生产日期: 见喷码

使用期限:

CE 0123

不得二次使用

如包装破损切勿使用

【注册人、生产企业、售后服务单位】: 稳健医疗用品股份有限公司
 【住所、生产地址】: 深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园
 电话: 0755-28138888 传真: 0755-28134588 28134688 邮编: 518109
<http://www.winnermedical.cn> E-mail: info@winnermedical.com
 【受托企业】: 稳健医疗(黄冈)有限公司
 【住所、生产地址】: 湖北省黄冈市赤壁大道特一号
 【生产许可证】: 鄂食药监械生产许20110531号
 【说明书修订日期】: 2019年10月10日

请您留言 **2. 防护衣**

防护服 符合国标 GB19082-2003 或 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》

海外同等参考

美国 ASTM F1671-97A

欧标 EN14126 Type 4(B)&5(B)&6(B), Type1-6, 数字越小防护越高; 4为医用推荐要求, 带(B)的类型是生物防护, 优先选择带B类型

具体确定可用的型号有(后附图片)

杜邦 TYVEK 800 (400 不可以!) (也是现在工厂加班加点赶制的款)

杜邦 (DU PONT) 1422A 医用防护服防传染隔离病毒细菌连体带帽 [出自: 协和医院捐赠要求.pdf 01/25]

雷克兰 AMN428ETS 灭菌型医用防护服

3M 白色戴帽防化服4565 (证书需要说明可以阻隔特定生物污染)

稳健医疗, 医用防护服, 符合GB19082-2009

二级以上医用防护服: 一般衣服上有红蓝条纹

1) Dupont Tyvek 1422A [复星官方文件 2020/01/25]

目前确认可接受的产品型号和规格标准 Confirmed Models of Medical Protective Gears


极·智
INNOVATION FOR EXCELLENCE

医用防护服 Protective Coveralls

Dupont Tyvek 1422A Type Protective Clothing Coveralls (Officially recommended)

杜邦1422A特卫强胶条防护服

- 采用杜邦专有织物Tyvek (特卫强) 制造
- 符合国标GB19082-20039
- 经消毒处理
- 柔软, 轻便, 透气性好, 防水, 透湿量7154克/平方米/天
- 表面抗湿性达到4级(GB/T4745/1997)
- 抗合成血液穿透达4级

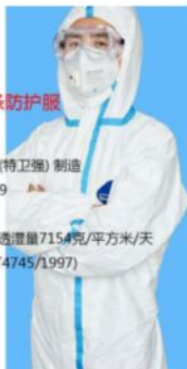

标准要求 Standards:

- GB1908- 2009 Standard (PRC Standard)
- Strip type protective coverall

世卫组织官方相关指引

General requirement for coveralls from WHO Guidelines:

- Single use, fluid resistant, disposable, light colors preferable to better detect possible contamination, thumb/finger loops or elastic cuff to anchor sleeves in place

重点要求阻隔液体、血液病毒。

相关欧洲标准为 EN14126:2003+AC:2004 – Infection protection against blood and viruses

也称杜邦 TYVEK 医用一次性防护服

[也是当前工厂加工款]

请您留言

杜邦™ TYVEK® 医用一次性防护服



杜邦™ Tyvek® 医用一次性防护服
特点及主要用途

- ✓ 采用杜邦™ Tyvek® 防护材料制作(41克/m²)
- ✓ ~~符合~~符合 ~~国标~~ GB19082 - 2009
《医用一次性防护服技术要求》
- ✓ 通过阻隔血液，粉尘、液滴、飞沫、降低细菌，病菌向医护人员传播机率
- ✓ 柔软、轻便，透气性好，透湿量超过 2500克/平方米·天
- ✓ 表面光滑不易沾湿，能有效的防止细菌附着，其抗湿性达到 4 级 (GB/T4745/1997)
- ✓ 抗合成血液穿透可达 3 级及以上
- ✓ 符合《人感染高致病性禽流感应急预案》(2006年5月)中对防护服的要求
- ✓ 获得中华人民共和国
医疗器械生产许可证，
许可证编号:沪食药监械
生产许 20051270 号



身材尺寸单位：厘米					
尺寸	胸围	身高	尺寸	胸围	身高
S	<92	<170	XL	108-116	180 - 188
M	92-100	168-176	2XL	116-124	186 - 194
L	100-108	174-182	3XL	124-132	192 - 200

3) 杜邦 TYVEK 800J(黄色边条) 或 600 (蓝色边条 , 也称 TYVEK classic plus)
[01/25 一线医生确认 + 1/26 更新 600 + 1/27 更新图片]

请您留言

DuPont™ Tyvek® 800 J

Original Name: new garment



Coverall

 TJ198TWHXX0025PI

- taped seam
- attached hood (respirator fit)¹
- storm flap
- elastic wrists
- elastic ankles
- CE certified
- Category III type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
- SM-3X



TI198T

Tyvek® 800 garments combine resistance to low-concentration, water-based, inorganic chemicals (even under pressure) with the durability of Tyvek® thanks to their innovative fabric technology and enhanced garment design

Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B

Suitable for applications such as industrial cleaning; chemical packaging and redistribution; waste treatment and disposal; environmental remediation and many others

Tyvek® 800 is white

PI = Packaged individually

4) 雷克兰 医用一次性防护服 AMN 428ETS

请您留言

产品参数



品牌：雷克兰

名称：医用一次性防护服

型号：AMN428ETS

材质：防护服外层为高质多微孔膜，内层为防粘聚丙烯无纺布，并制成连帽连体结构，采用胶条密封缝制，经过环氧乙烷灭菌

特点：柔软、质轻、相对较好的透气性；防静电、低脱屑，牢固耐用

用途：防粉尘颗粒物，防化学液体飞溅，通过阻隔血液、粉尘、液滴、飞沫，降低细菌、病菌向医护人员传播几率。雷克兰医用一次性防护服主要适用于防护颗粒物及轻度液体飞溅，对临床医务人员可能接触到的血液、体液、血液传播病原体、传染性悬浮微粒、干性或湿性微生物/细菌的渗透提供防护。

标准：GB19082-2009

许可：鲁食药监械生产许20140112号

编号：鲁械注准20142640179

有效期：无菌存储有效期3年

欧洲尺码

请选择适合你的胸围、身高尺码的产品，正确的选择能增强产品的舒适度并能延长使用时间

成衣尺码	身高（厘米）	胸围（厘米）
S	164-170	84-92
M	170-176	92-100
L	176-182	100-108
XL	182-188	108-116
XXL	188-194	116-124
XXXL	194-200	124-132



4) 3M 4565

请您留言

3M™ 白色戴帽防化服 4565（可用）



4565白色带帽红色胶条连体防护服(Type4, 5&6类防

Features taped seams that help provide barrier protection against liquid splashes, hazardous dust, and certain biological contaminants.

官方说明可以标注阻止特定生物污染



5) Winner 稳健医疗，医用防护服

请您留言



winner 稳健医疗

Medical Disposable Coverall

医用一次性防护服

连身式

1件/袋

生产许可证: 鄂食药监械生产许20100306号
注册证编号: 鄂械注准20142641943
产品技术要求编号: 鄂械注准20142641943

产品适用范围: 为医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用。

产品性能结构及组成: 产品的主要性能指标液体阻隔功能、断裂伸长率、过滤效率等均符合GB 19082-2009医用一次性防护服技术要求标准要求。

产品组成: 采用无纺布为原料缝制或粘合或热合加工而成。

使用方法:

1) 使用前, 请按包装袋上的尺寸附表选择合适的防护服号型。

2) 将防护服拉链拉至衣服的底部, 穿套顺序为: 双腿—胳膊—头部, 依次穿套好后, 最后将拉链拉至下颚处。

3) 确保防护服穿戴规范, 头部、手腕处、脚踝口处覆盖严密, 以获得最佳的防护效果。

禁忌症、注意事项、警示及提示性说明:

1) 使用前请先仔细阅读使用说明, 并检查包装是否完好, 对包装标志、生产日期、有效期进行确认, 并在灭菌有效期内使用。

2) 本产品为一次性用品, 禁止重复使用。

3) 本产品已采用环氧乙烷灭菌, 包装破损, 禁止使用。

4) 对无纺布过敏者慎用。

5) 产品使用后, 应按医院或环保部门要求进行处理。

理想级别: 不适用

贮存条件: 建议贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。

运输条件: 在运输时应防止重压、阳光直射和雨雪浸淋。运输要求按订货合同规定。

有效期: 自灭菌之日起, 有效期三年

号型列表:

连身式号型规格

单位为厘米

号型	身長	胸围	袖长	袖口	脚口	脚套
160	194	116	87	18	25	38
165	199	122	89	18	25	38
170	204	128	90	18	26	38
175	209	134	92	18	26	38
180	214	140	94	18	26	38
185	219	146	96	18	27	38
偏差	±2	±2	±2	±2	±2	±2

灭菌级



使用前需阅读使用说明



总经销: 稳健医疗用品股份有限公司
电话: 0755-28138888 传真: 0755-28134588 28134688
【注册人、生产企业、售后服务单位】: 稳健医疗(襄阳)有限公司
【住所】: 襄阳市天城镇中津村(金城大道)
【生产地址】: 襄阳市天城镇中津村(金城大道)9A号 邮编: 437500
电话: 0715-3371588 传真: 0715-3371587
http://www.winnermedical.com E-mail: info@winnermedical.com
【说明书修订日期】: 2018年05月30日

请您留言



7) 日本防护服

JIS T 8060, JIS T 8061, JIS T 8062 [1/27 11:00 更新，来自武汉大学人民医院设备科]

8) 欧洲防护服


EN14126 + Type 4(B)/EN 14605 以上

[出自团队自查、反复核对；并结合重庆医科大附属第一医院胸外科医生审核的东南大学校友会整理的欧洲采购指南，1/27]

首要满足 EN14126 标准，医学防护 (protective clothing against infective agents)；也可对照下图图标
防水性/密闭性：分为Type 1-6，数字越小等级越高；医用推荐 Type4(B) 及以上; 也可对照编码 type 3&4 对应 EN14605 ；下图中也有图标



上下两个标准须同时满足，type 3 或 4 都可以（3 比 4 标准高）

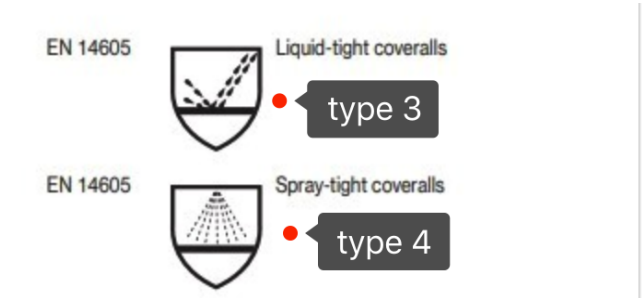

a. UVEX 4B (欧洲、德国有货)

请您留言

uvex

uvex 4B

Disposable coverall chemical protection type 4B



98375

uvex 4B

- General features:
- breathable, lightweight and flexible material for exceptional wearer comfort
 - particle-tight and spray-tight
 - free of paint wetting impairment substances and silicone


- Protection features:
- orange taped seams for optimal protection and good visibility
 - middle finger loops prevent sleeves sliding up the arm
 - self-adhesive zipper flap for optimal protection
 - anti-static properties
 - protection against infectious diseases

- Comfort features:
- skin-friendly nonwoven material inside
 - elasticated waistband for optimal fit
 - secure and convenient closures thanks to elasticated bands on hood, arms and legs
 - two-way zipper

- Areas of application:
- low-pressure industrial cleaning and building cleaning
 - ship building and automobile manufacture
 - chemical and pharmaceutical industries
 - handling paints and varnishes
 - agriculture and horticulture
 - pest control
 - electronics and cleanroom environments
 - work with asbestos and dismantling
 - remediation of contaminated sites
 - pharmaceutical industry and laboratories
 - sampling
 - livestock breeding and veterinary medicine
 - waste management

uvex 4B	
Art. no.	98375
Material	polypropylene spunbond, polyethylene film laminate
Colour	white, orange
Sizes	S to 3XL
Retail unit	40

Certified in acc. with

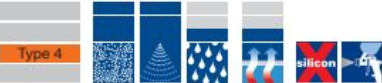

b. 3s arbeitsschutz PROTEC PLUS weiß Gr.

请您留言




PROTEC PLUS weiß Gr. XXXXL

Home / Produkte / Protec Plus



PROTEC PLUS weiß Gr. XXXXL

5,94€ inkl. MwSt.

XXXXL 

Dieser Artikel ist nicht in ausreichender Menge auf Lager.
Die Lieferzeit kann sich dadurch verlängern.

1 

IN DEN WARENKORB

EAN: 4260541383758



Description

- Ausführung:
- Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze
 - Ergonomische Kapuze
 - Taillengummi für individuelle Größenanpassung
 - Abklebbare Kinnabdeckung
 - Selbstklebende Reißverschlussabdeckung
 - Dichte Nähte
 - Großzügig geschnittener Schrittbereich
 - Elastische Daumenschlaufen
 - Farbe: weiß
 - Gewicht: 65 g/m²
 - Größe: XXXXL
 - Material: Mikroporöses Filmlaminat

9) 美洲防护服
出自复星 01/25 采购文档]

请您留言

目前确认可接受的产品型号和规格标准
Confirmed Models of Medical Protective Gears

医用防护服 Protective Coveralls

美洲 AMERICAS

品名 Product Name	渠道 Distribution Channel	标准 Standards
Dupont Tyvek 600	U.S.A.	
Dupont Tyvek 800J	U.S.A.	

3.护目镜

【国内标准】

- 1. 二级以上医用护目镜 - Medical Safety Goggles / Protective Eyewear，弹性佩戴（可以和近视镜兼容）、防雾、视野宽阔、必须有防溅功能，不能带通风口
- 2. 医生推荐型号 3M 1623AF /1621AF 防护眼镜（国内）；GA500护目镜（海外）
- 3. 其他符合条件 1 的护目镜也可

1623AF防雾防化学护目镜

3M ID XM003825895

总览

详细信息



- 间接通风口设计，防止起雾，增加佩戴舒适感
- 180°大视窗，视野极佳，有效提供舒适感
- 更宽可调节头带，更舒适
- 防雾涂层

[查看所有细节](#)

请您留言

【国外标准】

- 2) 美国国家标准ANSI Z87.1 – 2015（面部和眼部护具的美标），基础准则

暂无更精准的医疗标准，海外采购也请满足 弹性佩戴（可以和近视镜兼容）、防雾、视野宽阔、必须有防溅功能，不能带通风口标准

二.医用口罩，防护服，护目镜规格参考表

物品	医用规格（必须符合或高于）	厂家 & 型号（不限于）
口罩	医用防护口罩（需要防高压液体喷溅）	
	国内标准	
	GB 19083-2010	
	美国	
	NIOSH 认证，N95/N99 + AST	3M
	M F1862	913
	level 1/2/3（Fluid resistant C	2/1860（官方推荐）1870+（符合国内标准）
	DC 美国疾控认证）	
	欧标	Mol
	FFP2/FFP3 + Type IR/IIR (fluid resistant 指标) [1/30 17:50]	dex
	日标（满足 1 或 2）	Medi
	1. 明确写明「サージカル N 95 レスピレーターとして液体防護性があり、血液を含む液体等に有用」	cal Masks 3100/3150/3200/3250
	2. 符合以下数据	(FF
	a) 人工血液不浸透性 80mmHg 以上	P 2/3 + Type IIR)
	b) Δ P（呼吸抵抗）< 35mmHg	[1/3
	20	0 14:00]
请您留言	[1/27 11:00，武汉大学人民医院设备科验证]	

<div><div>其他防护口罩 n95/n99/KN95/FFP2</div><div><p>△重要提醒，来自于一线反馈，普通 N95/KN95/FFP2/FFP3 即使没有呼吸阀在没有 fluid resistant claim/Type IR 的情况下，无法用于医用，不如符合标准的外科口罩，购买优先级应次于符合标准的外科口罩</p><p>[1/30 14:00]</p><p>△请注意不要买到假货</p><p>国内</p><p>GB 2626 强制性标准，非油性颗粒过滤效率>=95%</p><p>欧标 FFP2/FFP3</p><p>美国 NIOSH 认证，非油性颗粒过滤效率>=95%</p><p>韩国</p><p>KF94 (不推荐，仅在物资匮乏时考虑)</p></div></div>	<div><div><div>Honeywell Sperian SAF-T-FIT Plus</div><div>3M 810</div><div>TRUSCO TR-3200B</div><div>PFR P1 P2</div><div>vilen株式会社，型号 V-1003N</div></div></div>
<div><div>医用外科口罩（独立包装防止交叉感染）</div><div><p>国内</p><p>YY 0469-2011 (印在每只独立外包装上)</p><p>美标</p><p>ASTM F2100-II 标准 level 2 & level 3</p><p>[1/27 由武汉大学人民医院设备科验证]</p></div></div>	<div><div><div>国内：</div><div>Win-ner 稳健医疗 [符合YY0469]</div></div></div>

	<div><div>欧标</div><div>EN 14683 + Type IR/IIR [1/30 17:50]</div><div>全球通用核心指标 (下文有详细图片)</div><div>颗粒过滤>95%, fluid resistant >120mmhg</div><div>[1/30 14:30] 关于独立包装的一线新信息：有医院是把非独立包装、符合要求的外科口罩进行自行消毒再用。</div></div>	<div>海外:</div> <div>haly ard health 48208/49207 (level 3 防液体，尽管标注为非灭菌，实际菌落数目要求高于国内，等同于国内灭菌等级)</div>
防护服	<div><div>防护服 符合国标 GB19082-2003 或 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》</div><div>其中两项重要指标为</div><div>1. 抗渗水性：静水压 > 1.67kPa (17cm H2O)</div><div>2. 抗合成血液穿透性 > 1.75kPa(不小于 2 级，即 2-6 级皆可)</div><div>[1/27 16:17]</div><div>戴帽 + 尺寸别买太小</div><div>美国</div><div>ASTM F1670</div><div>[1/30 11:12]</div><div>欧标</div><div>EN14126* + Type 4(B)/EN 14605 以上**</div><div>[1/27 11:30, 重庆医科大胸外科文档参照 + 1/27 20:55 加入 EN14605]</div></div>	<div>品</div> <div>牌：Du Pont 杜邦</div> <div>Type k 特卫强 1422A 连体服 CHA 5 医用款一次性防护服</div> <div>△不建议未经过国内 GB19082 认证的 1422A</div> <div>TYV EK 系列</div> <div>800 J/600(or classic plus)/500 expert/classic Plus</div> <div>Tyc hem 系列</div> <div>200 0/C/F/4000 S/6000 F/ThermoPro/TK</div> <div>[1/29 23:07]</div>

请您留言

请您留言	日本规格		品
	通过JIS T 8060 8061 8062测试 标注「人工血液バリア性・ウイルスバリア性 クラス 2 ・ クラス 3」		MUT
	[1/27 14:38, 武汉大学人民医院设备科验证]		CO
	*EN14126: Protection against infective agents		SPA
	** Type 是 Chemical Protective Clothing 的分级，数字越低，标准越高，最好带 B, 也可能是标 EN14605 （具体见后文细则）		C4/
	[1/27 20:55 更新]		[1/2
			9 23:07]
	UVEX 4B [1/27 19:21]		
	雷克		
	兰		
	医用		
	一次性防护服 AMN 428ETS		
	3M		
	4565		
	Win		
	ner 稳健医疗		
	一次		
	性医用防护服（他家只有一款）		

		<div><div>ell</div><div><div>Ans</div><div>Micr</div><div>oguard 2000b/2000 TS PLUS/2500/2500 Plus</div><div>[1/3</div><div>0 20:36]</div><div><div>日進</div><div>医療器 型号：リーダー感染症対策防護服高ウイルスバリア</div><div><div>アズワン 型号：感染症対策防護服</div><div>[1/2</div><div>9 01:00 更新]</div></div></div></div></div>
--	--	---

请您留言

护目镜	可	其他符合红字条件的护目镜也	（ 1/27 15:38 护目镜若不符合上述要求最好别买，不能用，可考虑防护面罩代替 ）	3M	1623	AF /1621AF 防护眼镜（国内）	GA5	00 护目镜（海外）	Hon	eywell	型号	LG20（间接通风口 防液体飞溅）	1.10	05509 防雾+医用（最优）	2.10	05507 不防雾+医用	3.10	05509 防雾但未标明可医用	[01/	29 02:15]

更多检测内容，电话咨询：156 6560 3132
捷标检测 官网：www.jiebiaotest.com

【来源：internet】
版权与免责声明：
①本网凡注明"来源：xxx（非本网）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
②如涉及作品内容、版权等问题，请在作品发表之日起两周内与本网联系，我们将在第一时间删除内容。

请您留言

输入关键字...

Q

联系信息

杭州捷标检测技术有限公司

地址：浙江省杭州市经济技术开发区保利天地中心7幢1003室

电话：400-880-4601

传真：0571-88082379

邮箱：18958096039@163.com

热点新闻

请您留言



(/a/news/497.html)

口罩，防护服，护目镜选择指南 (/a/news/497.html)

📅 2020-02-03



(/a/news/496.html)

国家药监局要求：确保疫情防控用药用械 (/a/news/496.html)

📅 2020-01-30



请您留言

(/a/news/493.html)

节前仪器关机维护日常 (/a/news/493.html)

📅 2020-01-16

关于我们 (/A/GONGSIJIANJIE/)

杭州捷标检测技术有限公司 是一家专门从事产品检测认证与产品质量控制的专业服务机构，有着近十年从事进出口欧美，澳洲的产品安全认证的经验。 2015年底与国家汽车检测重点实验室达成良好的合作意愿，为客户提供专业一站式检测解决方案。 本公司作为一个国际化的专业检测技术服务机构，与SGS、Intertek、TUV、B V及Dekra等国际权威检测及认证机构开展广泛合作，能全方位帮...

版权所有 杭州捷标检测技术有限公司 浙ICP备15044120号 ([HTTP://BEIAN.MIIT.GOV.CN/](http://BEIAN.MIIT.GOV.CN/))

友情链接：百度 ([HTTP://WWW.BAIDU.COM/](http://WWW.BAIDU.COM/)) 网站制作 ([HTTP://WWW.HZXHU.COM/](http://WWW.HZXHU.COM/)) 360 ([HTTP://WWW.SO.COM](http://WWW.SO.COM))

请您留言